



BT6/BT10 血液專用 不可逆-溫度貼紙

Button-Activated Blood Temperature Indicator

6°C - 血液儲存
10°C - 血液運輸



即貼即用
節省成本又省時



變色指示
安全性一目了然



產品特色 Feature



一鍵啟動監測

操作簡單，只需按鈕驅動，精確值達 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，且標籤於室溫下容易保存



標示清晰

一眼即可辨識血液於運輸或儲放期間是否已暴露在不適宜的溫度下



專為血液監測設計

應用於血液儲藏、血庫、醫院冰箱或臨時儲存血液的環境



符合多項規範

通過國際標準AABB、FDA、ISO 13485等認證，品質有保證

有什麼好處? Benefit

血液儲存及運輸過程中，為了確保有效性及安全性，必須保持在精確溫度範圍中

- ◆ 血液儲存溫度的監控，必須儲存於低溫下(1~6°C)
- ◆ 運輸過程中，必須保持適宜的溫度(4°C±2°C)並儘量維持在1~10°C間。

※ 參考資料：台灣血液基金會

舊式


- 人工固定監測並記錄
- 耗費時間
- 增加人事成本
- 可能產生數據誤差率

V.S.

新式

- 變色提醒，一目了然
- 即貼即用，操作簡易
- 提高成本效益
- 免除數據誤差率

規格尺寸 Dimension

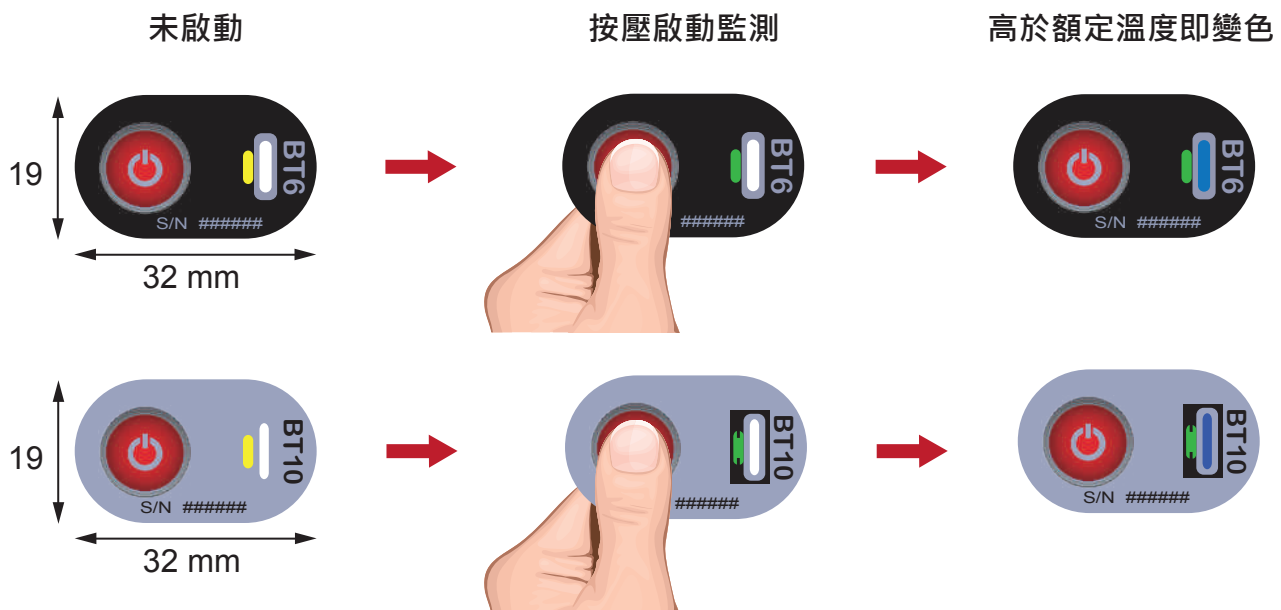

型號	描述	尺寸	變色狀態
BT6	血液儲存用-溫度貼紙	19×32 mm	按壓啟動鈕後，第一區塊由黃變綠。 當溫度超過貼紙額定溫度，第二區塊由白變藍
BT10	血液運輸用-溫度貼紙	19×32 mm	

※產品規格若有變更，恕不另行通知。



服務專線：+886-4-23729418
傳真電話：+886-4-23724011

www.jetec.com.tw
(40349) 台中市西區福人街11號

久德電子
Jetec Electronics Co., Ltd.